
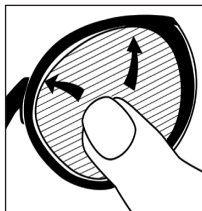
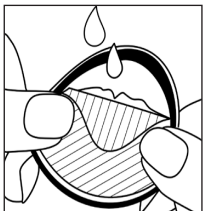


Anbringung
Application
Aanbrengen
Aplicação
Påsetting
Applicazione

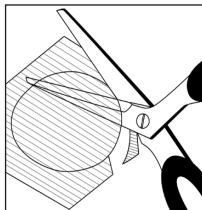

DE **Reinigung:**

Die Folie vom Brillenglas abziehen und mit warmem Wasser unter Beigabe eines Geschirrspümmittels reinigen. Anschließend die Folie abspülen und wieder anbringen. Dazu die Rückseite des Brillenglases anfeuchten. Dann die Folie auflegen und entstehende Luftblasen ausstreichen. Dabei auf die korrekte Position der Prismenfolie achten.

Dem Träger wird empfohlen, Brillenglas und Folie regelmäßig entsprechend der Anleitung zu reinigen.

Empfohlene Lagerzeit: max. 2 Jahre

Lieferbare Prismenfolien:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17.5, 20, 25, 30, 35

EN **Cleaning:**

Pull the foil off the lens and clean with warm water adding a dish-washing liquid. Then rinse off and replace the foil as recommended above. Make sure to replace the prism-foil in the correct position.

The wearer is advised to clean the lens and foil regularly according to the instructions.

Recommended stock-time: max. 2 years

Available prism power:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17.5, 20, 25, 30, 35

FR **Nettoyage:**

Retirer la feuille du verre de lunettes et le nettoyer dans de l'eau chaude avec un peu de détergent vaisselle. Le rincer ensuite et le remettre en place comme décrit plus haut. Faire bien attention à positionner la feuille prismatique correctement!

Nous conseillons au porteur de nettoyer régulièrement le verre de lunettes et la feuille comme le décrivent les instructions.

Temps de stockage conseillé: 2 ans maximum

Épaisseurs des prismes disponibles:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17.5, 20, 25, 30, 35

NL **Reinigen:**

Verwijder de folie van het brillenglas en reinig het in warm water met wat afwasmiddel. Spoel de folie vervolgens af en breng hem weer aan zoals hierboven beschreven. Let daarbij op de juiste positie van de prismafolie!

De brildrager wordt geadviseerd om het brillenglas en de folie regelmatig zoals voorgeschreven te reinigen.

Aanbevolen bewaartijd: 2 jaar

Leverbare prismasterktes:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17.5, 20, 25, 30, 35